


Reumatikerkrycka

sanicare 
your daily life

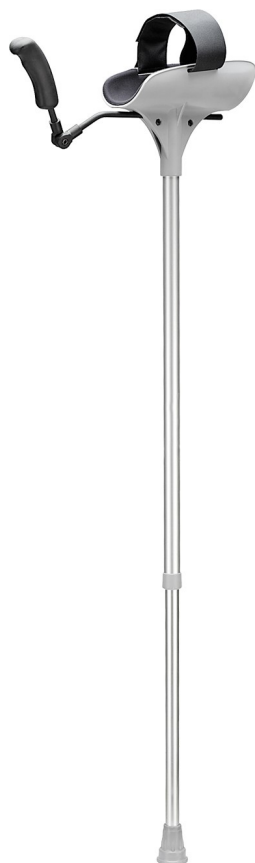

Reumatikerkrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckan går lika bra att använda inne som ute.

Reumatikerkryckan (RA) är till för den som ej kan belasta handen eller handleden med en vanlig klassisk krycka. Reumatikerkryckan har ett horisontellt stöd för underarmen. Handtaget är justerbart framåt, bakåt och även vridbart i sidled.

Underarmsdelen är i mjukt vadderat material och det ergonomiska handtaget är tillverkat i mjukt TPE. Kryckan passar till både vänster och höger arm. Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material.



Benämning	Reumatikerkrycka
Sanicare art nr	10
Monterad isdubb	Nej
Längd på krycka	95-118 cm
Justerbar längd på underarmsstöd	12-21 cm
Vikt per produkt	0,66 kg
Färg rör	Alu
Max brukarvikt	140 kg
Tillbehör –Rekommenderad doppsko	Doppsko rekommenderas med 19 mm i Ø, t.ex. 719 + färgkod
Material	
Plastdelar	Plast
Handtag	Plast
Rör	Aluminium
Rengöring	
Regelbunden Mellan brukare	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel.
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.
Garanti	Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.




Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



sanicare
your daily life

 **Kontrollera kryckan regelbundet.** Kryckan skall kasseras och tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, är utsliten eller glappar i höjdjusteringen vilket kan medföra risk vid användning.
Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se